

REUNION IDE

15 Oct 2015



Ordre du jour :

- **La demande d'accréditation du laboratoire**

et tout ce que cela implique pour NOUS ... et pour **VOUS**

- **Ubilab** : Votre manuel de prélèvement en ligne 24/24



L'accréditation,
cela implique pour **NOUS,**

Maîtrise et **Traçabilité**


Pour **VOUS**, cela implique
de noter :

La DATE

mais aussi **l'Heure de Prélèvement**

Pourquoi ?

Les analyses ont
**des délais maximum de
transmission
au laboratoire**

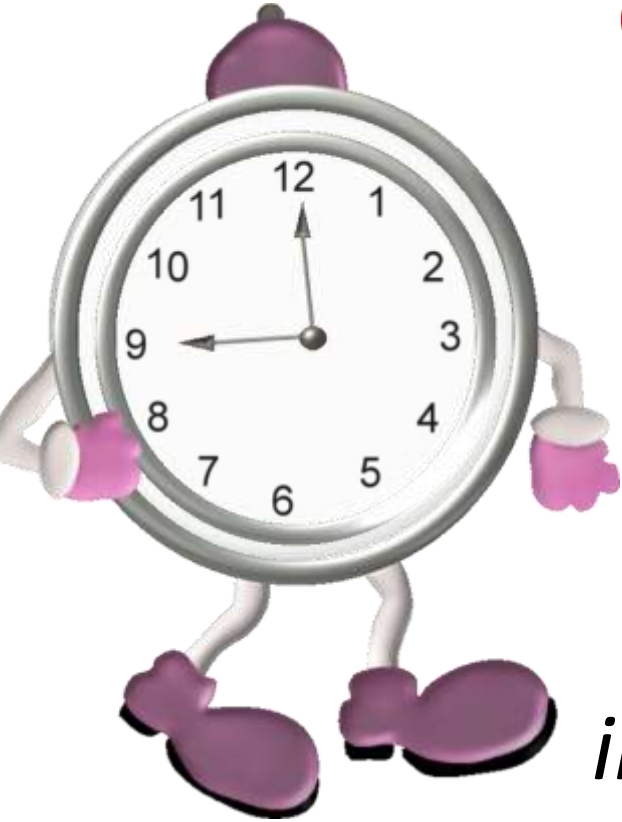

*et sans l'heure de prélèvement,
il est impossible de calculer le délai.*

Nos délais de transmission sont les suivants :

8 heures à température ambiante pour toutes les analyses



Excepté, ...

Excepté ... :

Potassium 6 heures

CPK 6 heures

LDH 6 heures

BNP 4 heures

Anti Xa/Héparine 4 heures

Plaquettes 24 heures

Certaines analyses doivent être d'emblée prélevées au laboratoire :

- **PSA LIBRE**

- **CALCITONINE** (Congélation


immédiate après centrifugation)

- ...

*Si l'heure de prélèvement n'est pas indiquée



*Si Le délai de transmission est dépassé,

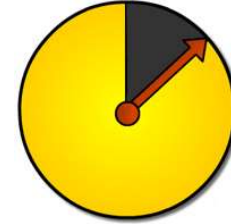

*des commentaires apparaissent sur les résultats pour informer le clinicien **qu'il doit interpréter les résultats avec prudence.***




Si l'heure n'est pas renseignée,

Le commentaire qui apparait sur le compte-rendu est le suivant :

L'absence d'heure de prélèvement ne permet pas d'apprécier le délai d'acheminement des échantillons au laboratoire. En l'absence de cette information, l'interprétation des résultats doit se faire avec prudence.

Si le délai est dépassé,

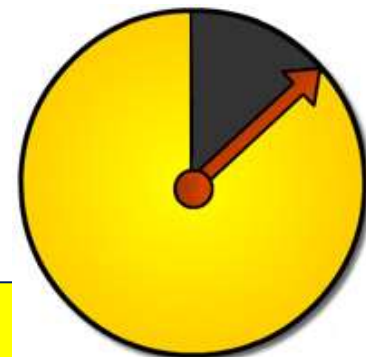

Le commentaire qui apparait sur le compte-rendu est le suivant :

Echantillon(s) pour analyse (s) (ex : CPK) reçu(s) au laboratoire en dehors des délais de transmission préconisés.

A recontrôler éventuellement dans les conditions préanalytiques requises.

Si les conditions préanalytiques ne sont pas respectées,

exemple : Cortisol mais aussi TSH prélevés à 11h, ELP prélevée chez un patient non à jeun, ...

Le commentaire qui apparait sur le compte-rendu est le suivant :

Echantillon(s) pour analyse (s) (ex : cortisol) prélevé(s) en dehors des préconisations du laboratoire.

A recontrôler éventuellement dans les conditions préanalytiques requises.



Pour **VOUS**, cela implique

de noter :

Votre nom

*Pour des raisons de traçabilité
mais aussi de réactivité en cas de Non-Conformité*

Pour **VOUS**, cela implique

de noter :

précisément l'identité du patient

Attention à ne pas confondre la FIP de


Monsieur



avec celle de **Madame**



Cas particulier des Groupes sanguins :

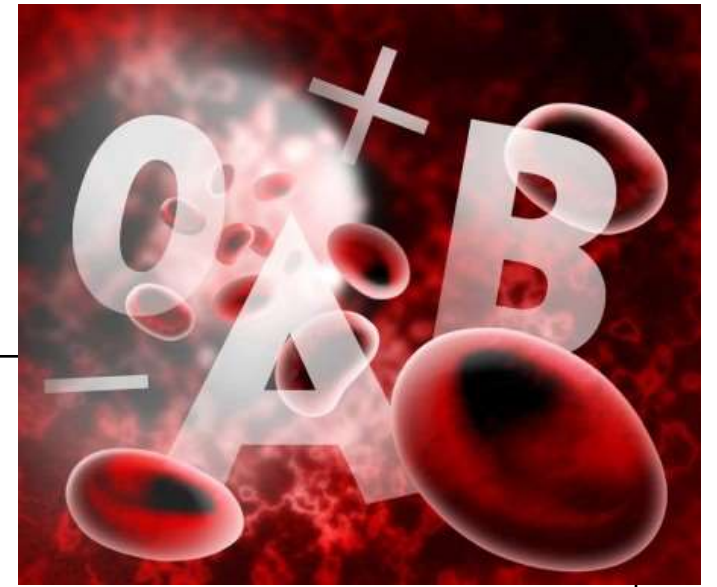

2 Déterminations de Groupes Sanguins impliquent :

- **2 Prélèvements séparés conditionnés comme 2 prises de sang différentes.**

cad :

2 Boîtes

avec

2 Fiches de renseignement médical sur lesquelles vous aurez attesté la vérification de l'identité du patient (Nom/Prénom/Njf/DN/Lieu de naissance)

Les Urgences



- ***Vous pouvez nous aider à les prendre en charge encore plus vite .***

Le Triple Emballage :





Ubilab

- ***Votre nouveau manuel de prélèvement***

- Toujours à jour
- Toujours à votre disposition
- Facile à utiliser
- ...

